



TECHNIEK

EERSTE GEBRUIK



- 1 Open het deurtje van de transparante zijkamer.
- 2 Haal de foliestrip uit de zijkamer door de volledige lengte van de strip voorzichtig af te scheuren over de tandjes van de zijkamer. **Trek hierbij niet** aan de strip!
- 3 Sluit het deurtje van de zijkamer en verwijder de afgescheurde foliestrip.



- 1 Ga rechtop zitten.
- 2 Houd de **Forspiro®** rechtop en open de beschermkap.




- 3 Laad de **Forspiro®** eenmaal door de witte laadhendel helemaal naar achteren te brengen tot de klik en breng nadien terug in de gesloten positie tot de klik.
- 4 De inhalator is geladen en de medicatie staat klaar voor gebruik.

AANBEVELINGEN

- ✓ Bewaar de **Forspiro®** op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de **Forspiro®**.
- ✓ De **Forspiro®** is leeg als de dosisteller op nul staat. Bij de laatste 10 dosissen verschijnt een rode achtergrond op de dosisteller.
- ✓ Na het laden van de inhalator onmiddellijk de dosis inademen.



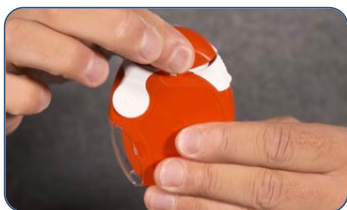

5 Houd de **Forspiro®** horizontaal met het beschermend deksel naar beneden gericht.

6 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).

7 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

8 Buig het hoofd licht achterover.

9 Adem eenmaal snel en diep in, zodat de medicatie vrijkomt. Blijf daarna verder en volledig inademen.

10 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) en neem ondertussen de inhalator uit de mond.

11 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).

12 Sluit het beschermend deksel over het mondstuk.

13 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

