




TECHNIEK



- 1 Ga rechtop zitten.



- 2 Verwijder de beschermkap.

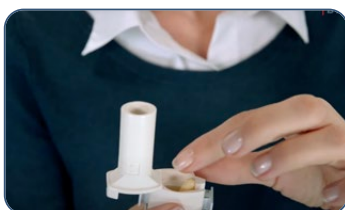

- 3 Houd de **Aerolizer®** rechtop. Draai het mondstuk in de richting van de pijl, terwijl u het onderste deel van de inhalator vasthoudt.



- 4 Neem één **capsule** uit de verpakking en plaats deze in de daarvoor voorziene opening.

- 5 Draai het mondstuk weer dicht tot u een klik hoort (tegen de richting van de pijl in).

AANBEVELINGEN

- ✓ Werp het inhalatietoestel weg als de verpakking leeg is. Bij elke nieuwe verpakking is een gratis **Aerolizer®** ingesloten.
- ✓ Bewaar de **Aerolizer®** en de verpakking op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de **Aerolizer®**.





- 6 Houd de **Aerolizer®** rechtop en druk beide knoppen **één keer volledig en gelijktijdig** in. De capsule wordt doorprikt.

- 7 Laat beide knoppen los. De **Aerolizer®** is geladen en klaar voor gebruik.

- 8 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).

- 9 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

- 10 Buig het hoofd licht achterover.



- 11 Adem **snel en diep** in. U hoort de capsule **trillen**. Blijf daarna verder en volledig inademen.

- 12 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) **en neem ondertussen de Aerolizer® uit de mond**.

- 13 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).



- 14 Herhaal stap 8 tot en met 13 om de capsule volledig leeg te maken.

- 15 Open het mondstuk en **verwijder de lege capsule**. Draai het mondstuk weer dicht en plaats de beschermdop terug.



- 16 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

