

Autohaler®



TECHNIQUE

PREMIÈRE UTILISATION

S'il s'agit d'un nouvel appareil ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant deux semaines ou plus, vous devez tout d'abord le tester avant l'emploi en pulvérisant deux doses en l'air de la façon suivante:



- 1 Enlevez le capuchon de l'embout buccal en appuyant vers le bas sur la languette située à la face postérieure.



- 2 Secouez énergiquement l'**Autohaler**® durant quelques secondes.



- 3 Tenez l'**Autohaler**® droit et repoussez le levier qui se trouve au-dessus du dispositif vers le haut.



- 4 Dirigez l'ouverture de l'embout buccal de telle sorte que le médicament libéré le soit simplement dans l'air environnant et non vers vous. Pour libérer une première dose, appuyez dans le sens de la flèche sur le petit disque qui se trouve sous l'appareil.


- 5 Ramenez le levier à l'horizontale.

- 6 Répéter les étapes 2 à 4 afin de libérer une deuxième dose. Après avoir libéré la seconde dose, ramenez à nouveau le levier à l'horizontale. L'**Autohaler**® est prêt à l'emploi.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Gardez l'**Autohaler**® à température ambiante et à l'abri de l'humidité.
- ✓ Ne jamais expirer dans l'**Autohaler**®.
- ✓ L'**Autohaler**® est totalement vide quand vous sentez et vous entendez qu'il ne sort plus rien de l'embout buccal.



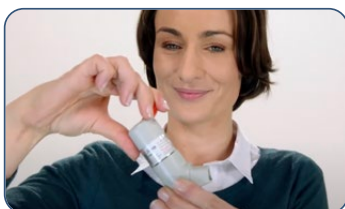

- 1 Tenez-vous droit.
- 2 Retirez le capuchon de l'embout buccal en tirant vers le bas la languette située à l'arrière.
- 3 Secouez fort l'**Autohaler**® durant quelques secondes.
- 4 Tenez votre **Autohaler**® bien droit. Placez le levier situé au-dessus de l'appareil en position verticale. L'**Autohaler**® est prêt à l'emploi.
- 5 Continuez à maintenir l'**Autohaler**® bien vertical de telle sorte que votre main ne bloque pas les fentes d'admission situées sous l'appareil.
- 6 Expirez à fond (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).
- 7 Placez l'embout buccal dans la bouche (entre les dents) et refermez bien les lèvres autour de l'embout.
- 8 Penchez légèrement la tête vers l'arrière.
- 9 Inspirez lentement et profondément à travers l'embout buccal. N'arrêtez pas d'inspirer lorsque vous entendez un léger déclic, parce qu'il est important que vous continuiez à inspirer après la libération de la dose.
- 10 Retenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes (ou aussi longtemps que vous le pouvez) et **retirer l'Autohaler**® de votre bouche.
- 11 Expirez doucement (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).
- 12 Ramenez le levier en position horizontale.
- 13 Si votre médecin vous a prescrit plus d'une dose, répétez les étapes 3 à 12.
- 14 Après l'utilisation remplacez le capuchon protecteur sur l'embout buccal.
- 15 Rincez-vous la bouche avec de l'eau (**ne pas avaler**).

