



Aérosol doseur avec chambre d'inhalation

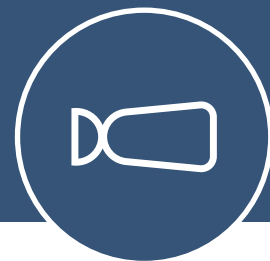

TECHNIQUE

PREMIÈRE UTILISATION / NETTOYAGE

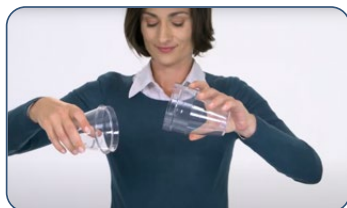

1 Démontez les différentes pièces de la chambre d'inhalation.



2 Plongez les pièces dans un bassin avec de l'**eau tiède savonneuse**. Assurez-vous que les pièces soient **complètement submergées**. Rincez préalablement si nécessaire la chambre d'inhalation.



3 Laissez reposer les différentes pièces dans le bassin pendant **30 minutes**.


4 Retirez les pièces du bassin. Secouez la chambre d'inhalation pour éliminer l'excès de mousse, en particulier à hauteur de la valve.

5 **Séchez** les différentes pièces à l'air libre sur du papier ménage **pendant minimum 6 heures** (il est préférable que vous le fassiez le soir après la dernière inhalation). **Ne pas rincer et ne pas essuyer avec un chiffon !**

6 Remontez les pièces ensembles.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Certaines chambres d'inhalation doivent être immergées **avant la première utilisation** dans un bassin d'eau savonneuse. Par cette action on diminue l'électricité statique de la paroi plastique (vérifiez sur la notice si ceci est d'application pour ce type de chambre d'inhalation).
- ✓ Nettoyez la chambre d'inhalation chaque semaine.

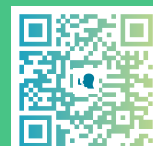



- 1 Tenez-vous droit.
- 2 Retirez le capuchon protecteur de l'embout buccal.
- 3 Secouez fort l'aérosol doseur durant quelques secondes.
- 4 Insérez l'inhalateur dans la chambre d'inhalation.
- 5 Placez l'embout buccal de la chambre d'inhalation dans la bouche (entre les dents) et refermez bien les lèvres autour de l'embout.
- 6 Penchez légèrement la tête vers l'arrière.
- 7 Inspirez lentement et profondément par la bouche puis arrêtez d'inspirer.
- 8 **Libérez un puff** dans la chambre d'inhalation.
- 9 Inspirez **lentement et profondément** par la bouche (endéans les 10 secondes après libération du puff dans la chambre).
- 10 Retenez votre respiration 5 à 10 secondes (ou aussi longtemps que possible) et **expirez lentement par la bouche OU inspirez 4 à 5 fois calmement dans la chambre d'inhalation**.
- 11 Si vous devez utiliser plusieurs doses recommencer les étapes de 3 à 10 inclus.
- 12 Retirez l'inhalateur de la chambre à inhalation et remettez le capuchon protecteur de d'inhalation.
- 13 Rincez-vous la bouche avec de l'eau (**ne pas avaler**).

RECOMMANDATIONS

- ✓ Si vous utilisez un nouvel inhalateur ou si vous ne l'avez pas employé pendant plus de 14 jours, vous devez actionner d'abord 2 doses dans le vide.
- ✓ Conservez l'aérosol doseur et la chambre d'inhalation dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- ✓ L'aérosol doseur est vide quand on ne constate plus de produit qui se libère.

