


# Dosisaerosol met voorzetkamer



## TECHNIEK

### EERSTE GEBRUIK / REINIGING

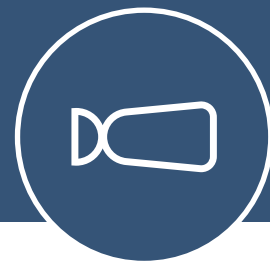

- 1 Haal de verschillende onderdelen van de voorzetkamer uit elkaar.



- 2 Leg de onderdelen in een kom met **water en een scheut afwasmiddel**. Zorg ervoor dat de onderdelen **volledig ondergedompeld** zijn. Reinig zo nodig het toestel.



- 3 Laat de ondergedompelde onderdelen weken gedurende **30 minuten**.

- 4 Haal de onderdelen uit de kom. Schud de inhalatiekamer om overtollig zeepsop te verwijderen, vooral ter hoogte van de klep.

- 5 Laat de onderdelen **drogen** op een zuivere doek **gedurende minstens 6 uur** (dit doet u het best 's avonds na de laatste inhalatie). **Niet afspoelen en niet afdrogen met een doek.**

- 6 Zet de droge onderdelen opnieuw in elkaar. Controleer of de klep open- en dichtgaat.

### AANBEVELINGEN

- ✓ Sommige voorzetkamers moeten ook bij het **eerste gebruik** ondergedompeld worden in een zeepoplossing. Daardoor wordt de binnenzijde van de voorzetkamer elektrostatisch vrij (kijk op de bijsluiter of dit nodig is voor uw type voorzetkamer).
- ✓ Reinig de voorzetkamer wekelijks.





1 Ga rechtop zitten.



2 Neem de beschermdop van het mondstuk van de dosisaerosol.



3 Schud de dosisaerosol krachtig gedurende enkele seconden.

4 Sluit de dosisaerosol aan op de voorzetkamer.

5 Neem het mondstuk van de voorzetkamer in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

6 Buig het hoofd licht achterover.

7 Adem rustig en volledig uit en stop met ademen.

8 Verstuif één puf in de voorzetkamer.

9 Adem nu pas **langzaam en diep in** (binnen de 10 seconden na het verstuiwen van de puf).



10 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) en adem rustig uit door de mond. OF Adem 4 tot 5 maal rustig in en uit door de voorzetkamer.

11 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 10.



12 Verwijder de dosisaerosol en plaats de beschermdop weer op het mondstuk van de inhalator.

13 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

## AANBEVELINGEN

- ✓ Als de dosisaerosol nieuw is of als deze gedurende twee weken of langer niet gebruikt werd, verstuif dan eerst twee dosissen in de lucht.
- ✓ Bewaar de dosisaerosol en de voorzetkamer op een droge en koele plaats.
- ✓ De dosisaerosol is leeg als er niets zichtbaars meer vrijkomt, maar u overschrijdt het aangegeven aantal dosissen beter niet.

