




TECHNIEK



1 Ga rechtop zitten.

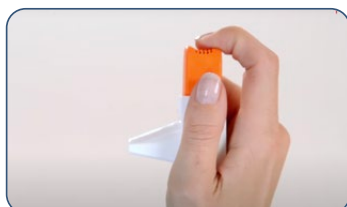

2 Houd de **Easyhaler®** rechtop stevig vast en schud hem enkele malen krachtig.

3 Neem de beschermdop van het mondstuk.

4 Blijf de **Easyhaler®** rechtop houden. Druk de drukknop bovenaan volledig in: u hoort een klik en laat dan de drukknop weer los. De **Easyhaler®** is geladen en klaar voor gebruik.



5 Blijf de **Easyhaler®** rechtop houden.

6 Adem rustig en bijna **volledig** uit (**nooit uitademen in de inhalator**).

7 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

8 Buig het hoofd licht achterover.

AANBEVELINGEN

- ✓ Bewaar de **Easyhaler®** op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de **Easyhaler®**.
- ✓ De **Easyhaler®** is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.





- 9 Adem **snel en diep in**, zodat de medicatie vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen.
- 10 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) en **neem ondertussen de Easyhaler® uit de mond**.
- 11 Adem rustig uit langs de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).
- 12 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 2 tot en met 11.
- 13 Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.
- 14 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

